

**Entretien**  
RITE Power



Il est important de nettoyer vos embouts ou prothèses auditives avec l'outil donné par votre audioprothésiste.




Avec la brosse, brossez l'embout. Insérez le petit fil en métal en forme de "U" dans le trou qui est au bout de l'embout ou de la prothèse. Tournez-le à l'intérieur et retirez-le bien droit. Assurez-vous que le trou de l'embout ne contient plus de cérumen.

Vous devriez également mettre de l'alcool à friction sur un mouchoir et nettoyer les embouts ou les prothèses avec le mouchoir. Ceci les désinfectera également.

Changez le petit filtre blanc (NoWax) qui est au bout des embouts une fois par mois :

### **NoWax**

1. Retirez l'outil (C) de son étui (A). L'outil possède deux extrémités, une avec un nouveau filtre (B) et l'autre avec un embout d'extraction (D).
2. Insérez l'embout d'extraction (D) dans le filtre à remplacer.
3. Tirez pour retirer le filtre usagé en gardant l'outil bien droit.
4. Retournez l'outil pour insérer le nouveau filtre.
5. Poussez le nouveau filtre dans le trou et retirez l'outil délicatement en le laissant bien droit.
6. Jetez l'outil usagé. Ne le réutilisez pas.

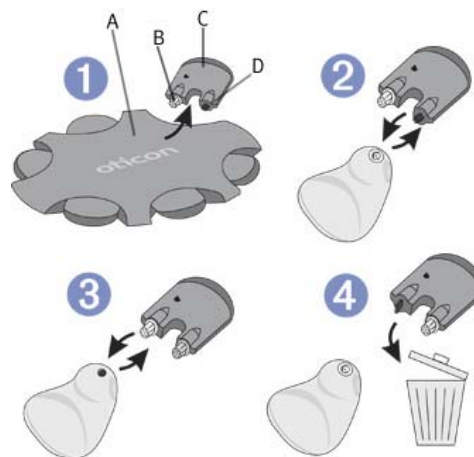

Si après avoir fait ces étapes vos prothèses ne fonctionnent toujours pas, vérifiez tout d'abord si la pile fonctionne. Si elle fonctionne mais que le problème persiste, vous devez nous téléphoner pour céder votre plage horaire qui sera les Lundi, Mercredi et Vendredi durant les heures de réparations mineures : 9h00 à 11h00 et 13h00 à 16h00.

N'oubliez pas d'apporter vos prothèses auditives tous les six mois pour vérification lors des mêmes heures mentionnées ci-haut. Ce service est offert SANS FRAIS pour les trois (3) premières années suivant la prise de Nous recommandons le remplacement des embouts à chaque 12 mois. Veuillez nous contacter pour prendre rendez-vous. DES FRAIS PEUVENT S'APPLIQUER.